




長さ調節機構



ツインロック機構

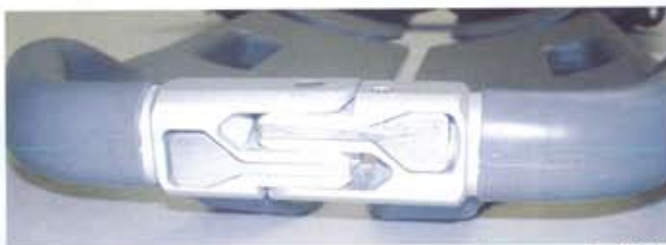

左右の羽根ですくうようにして収納します。

◆ 特徴 ◆

- リベットやロールピンを使用していないので、血液、体液等が内部に浸透せず、清掃も容易です。
- すくい羽はポリマー樹脂製なので、レントゲン写真の判読を妨げません。
- ヒンジ部はツインロック機構になっており、体重がかかっても脱着が容易です。
- 4段階の長さ調節ができます。
- 3本の固定ベルトが標準装備されています。(2ピースタイプ、バックルはプラスチック製)
- 色はグレーと黄色の2種類あります。

◆ 仕様 ◆

長 寸	165/178/190/202cm
幅	43cm
収納時長さ	120cm
厚 寸	7cm
重 量	7.4kg
最大荷重	150kg

輸入元: **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F
TEL 03 (5820) 4649 (代) FAX 03 (5820) 4669
商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1
TEL 0426 (77) 6656 (代) FAX 0426 (77) 6603
米国本社: オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ70

取扱店