



Bio Safe Strap

バイオ セーフ ストラップ シリーズ




1ピース 金属バックル タイプ 7フィート



スピードクリップ 金属バックル タイプ 5フィート



2ピース 金属バックル タイプ 5フィート

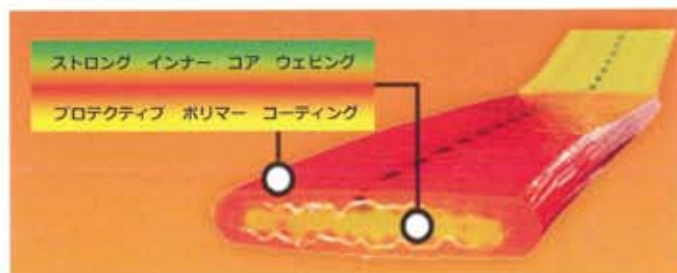

試験：ASTM D471 プラスチック試験規格 条件：室内温度23℃
 検体はポリマーコーティングのみ。 液体の中に検体を72時間浸し
 ※ASTM：米国材料・試験協会 硬度変化を調べる。
 ASTM D417をクリアしています。

試験に使用した液体：
 酢酸(弱酸性)・無鉛ガソリン・オイル 海水・水酸化ナトリウム・漂白剤

特 徴

- ポリエチレンのウェビングに熱可塑性ポリウレタン樹脂をコーティングしています。
- 永続性のあるコーティング ウェビングは血液や体液の浸透を防ぎ、衛生的な環境を提供します。
- ウェビングの厚さは1.02mmで柔軟性を備えながら、非常に丈夫で耐摩耗性に優れています。
- 接合部は高周波溶接で接着しているため剥離しにくいです。
- バイオ セイン コーティング ウェビングはアメリカ食品医薬品局(FDA)の皮膚感度の要件に準拠しています。

仕様は改良のため、予告なしに変更される場合があります。

輸入元 **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F

TEL: 03-5820-4649

TEL: 03-5820-4669

販売店