

Feature

⑨ バッテリー



バッテリー残量が
目視で行えます



⑩ ショックフレーム



⑪ Xレストレイント
色分けされたXレストレイ
ントを使用する事により安
全性が向上します

⑪ Xレストレイント



① ガススプリング式バックレスト

約0° ~77° まで
無段階調整が可能です



バックレスト背面には
資器材取付用フック
を装備しています

② 可倒式アーゴフレーム




5段階調整により狭所で
走行性向上のほか、持ち易
い角度へ調整できます

③ 調節式サイドアーム



サイドアームの角度を
調節してベッド面を拡
張する事ができます

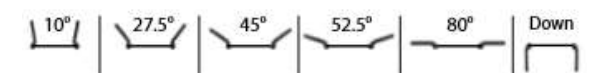


⑧ プルハンドル



⑦ マニュアル操作レバー

充電切れの場合はマニュアル
操作で高さを変更できます

⑥ 高さ調整ボタン

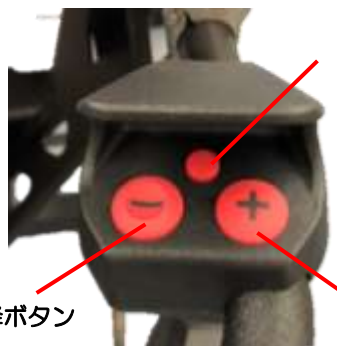

下降ボタン

上昇ボタン

ローディング
アジャスター

⑤ ブレーキペダル&ホイール



幅の広い6インチホイールの
採用により、起伏の多い路面
でも安定した走行が行えます

④ 方向固定機構



方向固定
切替ペダル

方向固定操作が
容易に行えます

Specification

Power X1	
全長 (最長)	2030mm
(最短)	1483mm
全幅	607mm
最高位	1120mm
最低位	412mm
ローディング高さ (最高位)	874mm
重量 (本体)	65kg
最大荷重	318kg
(資器材取付用フック)	22kg
充電時間	約1時間45分

- 標準付属品：
- マットレス 1枚
 - Xレストレイント 1式
 - 資器材取付用フック 1個
 - サイドアーム 1セット
 - 方向固定キット 1セット
 - プルハンドル 1個
 - バッテリー 2個
 - バッテリーチャージャー1個

Options

パックラック



IVポール



SOFネット



トラッカー



車載用充電機能付きファスナー



※PowerX1 専用のファスナーとなります。

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。
詳細情報は弊社ホームページまたは facebook をご確認ください。

FERNO FOR LIFE™

販売元：

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL：03(5820)4649
FAX：03(5820)4669
<http://www.ferno-jp.com/>

SEP, 2019



POWERX1™

電動ストレッチャー パワーX1

あなたの期待に応えます



69% バッテリーが長持ちします

1回の充電で113回の昇降が可能です



9% 更にフレームを短縮できます

狭所での走行性を向上させます



40% 昇降スピードがアップ

1.4秒で上昇、2秒で下降



82% 安定性が向上

転倒の危険性を軽減します



※上記パーセンテージは競合品との比較となります

